CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.


CE

KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO w wariancie UPROSZCZONYM z modułami MMPK.

www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Mini-moduł przywoławczo kasujący MMPK - przykład realizacji wariantu UPROSZCZONEGO bez lamp sygnalizacyjnych.

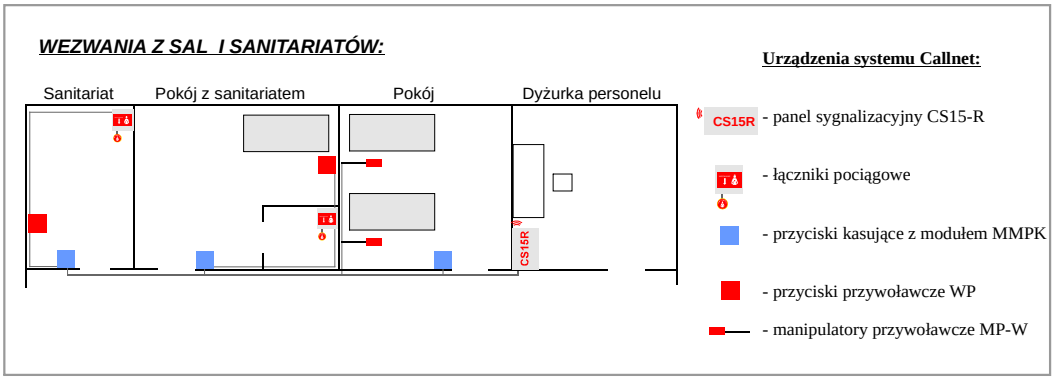

- **CHARAKTERYSTYKA:**
  - możliwość wezwania pomocy z sal oraz sanitariatów w obiektach gdzie nie jest wymagane zainstalowanie lamp sygnalizacyjnych nad drzwiami pomieszczeń,
  - zachowanie najważniejszej cechy systemu przywoławczego: kasowanie wezwań wyłącznie w miejscu ich włączenia przez pacjenta - indywidualne kasowniki w salach i sanitariatach,
  - współpraca ze standardowymi centralami CALLNET CS15-R,
  - opcja komputerowej rejestracji wezwań z central CS15-R.

- **FUNKCJONOWANIE:**
  Chwilowe wciśniecie przycisku w manipulatorze przywoławczym, zwarcie przycisków przywoławczych lub łączników pociągowych zostaje zarejestrowane w module MMPK i przekazywana jest informacja o zgłoszeniu do dyżurki pielęgniarskiej: zaświecona w panelu CS15-R dioda LED obok numeru pomieszczenia oraz sygnał akustyczny. Kasowanie wezwania następuje przyciskiem kasujacym po przybyciu pielęgniarki na miejsce wezwania.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnia **GWARANCJĄ.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

CE

www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,


GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Mini-moduł przywoławczo kasujący MMPK.

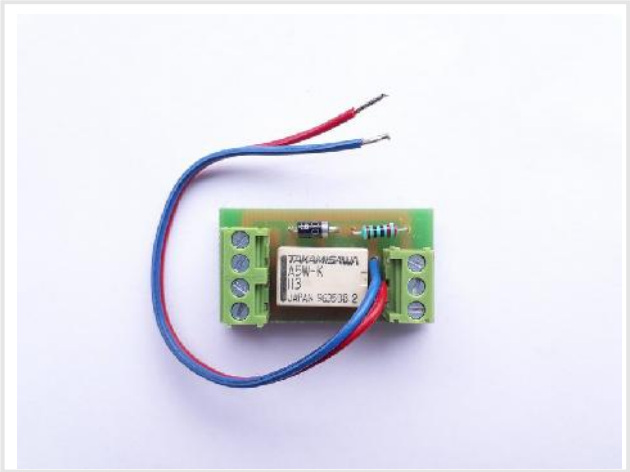

- **ZASTOSOWANIE:**

  Mini-moduł przywoławczo-kasujący zawiera układ rejestrujący wezwania i umożliwia realizację wariantu systemu CALLNET bez lamp sygnalizacyjnych. Moduł umieszcza się w kasowniku, pod przyciskiem w puszcze instalacyjnej (lub obudowie natynkowej) i do wejścia doprowazda się źródła wezwań, a wyjście dołącza się do standardowej centrali CS15-R.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Gabaryty: 36x20x14 mm, kabel ok. 10 cm do kasownika.
  Wejście wezwań z przycisków lub łączników pociągowych, wiązka kablowa do przycisku kasowania
  Wyjście sygnalizacyjne: z polaryzacją MINUS (MASA) do centrali CS15-R.
  Napięcie robocze: 12V DC z centrali (koncentratora).

- **MONTAŻ:**

  Moduł umieszcza się w puszcze instalacyjnej fi. 60 pod przyciskiem kasującym - mnimalna głębokość puszki wynosi 40 mm (zalecana jest głęboka 60 mm).

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Chwilowe zwarcie przycisków przywoławczych, manipulatorów lub łączników pociągowych zostaje zarejestrowane w module, do czasu skasowania przyciskiem kasującym.
  Jednocześnie do centrali w dyżurce pielegniarskiej przekazywana jest informacja o zgłoszeniu - zaświecona w panelu dioda LED obok numeru pomieszczenia oraz sygnał akustyczny.

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Przycisk kasujący WK



- **ZASTOSOWANIE:**

  Przycisk kasujący WK instalowany jest wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach wejściowych i przeznaczony jest do kasowania wezwań od pacjentów przez personel.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym KASOWANIE z ramką pojedynczą.
  Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60mm (głębokość min. 40mm, zalecana 60mm).
  Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

  W salach i sanitariatach przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podłogą.
  Dołączany do modułu MMPK.
  Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm, mnimalna głębokość puszki wynosi 40 mm (zalecana jest głęboka 60 mm).

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Przycisk kasujący umożliwia pielęgniarce skasowanie wezwania od pacjenta po wejściu do pomieszczenia.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

CE

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

CE

Przycisk przywoławczy WP



- **ZASTOSOWANIE:**

  Przycisk przywoławczy WP instalowany jest w salach chorych przy łóżkach oraz sanitariatach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym WEZWANIE z ramką pojedynczą.
  Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
  Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

  W salach przy łóżkach oraz sanitariatach, ok. 80-90 cm nad podłogą, w zasięgu ręki pacjenta.
  Dołączany do modułu MMPK.
  Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm.
  Dostępna jest również wersja natynkowa z innej serii osprzętu.

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie.
  Wezwanie zostaje zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Przyciski przywoławczy i kasujący WPK



- **ZASTOSOWANIE:**

  Przyciski przywoławczy i kasujący WPK instalowane są wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach wejściowych i przeznaczone są zarówno do wezwania pomocy przez pacjentów, jak i kasowania wezwań przez personel. Pod przyciskiem kasującym umieszczony jest moduł MMPK.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Łączniki przyciskowe niestabilne zwierne osprzętu elektrycznego w ramce podwójnej poziomej, oznakowane piktogramami żelowymi KASOWANIE i WEZWANIE.
  Gabaryty: 162x90mm, wersja wtynkowa do DWÓCH puszek instalacyjnych zespolonych fi.60mm o minimalnej głębokości 40 mm (zalecana 60 mm).
  Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

  W salach, sanitariatach, pokojach pobytu dziennego przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podłogą.
  Dołączany do modułu MMPK.
  Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w DWÓCH puszkach wtynkowych zespolonych fi. 60mm (dla typowego osprzętu elektrycznego w podwójnej ramce poziomej), mnimalna głębokość puszek wynosi 40 mm (zalecane są głębokie 60 mm).

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Przycisk kasujący umożliwia pielęgniarce skasowanie wezwania od pacjenta po wejściu do pomieszczenia.
  Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie.
  Wezwanie zostaje zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

CE

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

CE

Gniazdo manipulatora RJ14



- **ZASTOSOWANIE:**

  Gniazda manipulatorów RJ14 instalowane są w salach chorych przy łóżkach i przeznaczone dla manipulatorów przywoławczych do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Gniazdo RJ14 typu 6p4c (moduł zaciskowy beznarzędziowy), z ramką pojedynczą.
  Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
  Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

  W salach przy łóżkach, ok. 80-90 cm nad podłogą.
  Dołączany do modułu MMPK.
  Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm.
  Dostępna jest również wersja natynkowa z innej serii osprzętu.

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Gniazdo manipulatora umożliwia jego podłączenie dla pacjentów, gdy wymagane jest aby źródło przywołania znajdowało się w zasięgu ręki pacjenta.

- **UWAGI:**

  Zastosowanie innych gniazd RJ dla manipulatorów niż zalecane może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie manipulatorów przywoławczych !

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Manipulator przywoławczy MP-W z przyciskiem wandaloodpornym i opcjonalnym wieszakiem ściennym



Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCĄ.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

- **ZASTOSOWANIE:**

  Manipulator przywoławczy MP-W instalowany jest w salach chorych przy łóżkach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Gabaryty: 98x50/28x16 mm
  Obudowa z tworzywa ABS (kolor jasny szary) pokryta białą folią poliestrową, **WANDALOODPORNY mechaniczny przycisk niklowany WEZWANIE o bardzo wysokiej trwałości (ok. 1 mln zadziałań).**
  Przewód giętki ok. 2 m zakończony wtykiem RJ14 typu 6p4c.
  Napięcie robocze: 12V DC.
  Opcjonalnie wieszak ścienny.

- **MONTAŻ:**

  W salach przy łóżkach - gniazdo RJ14 typu 6p4c osadzone ok. 30-40 cm nad podłogą
  - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm (lub gniazdo z obudową natynkową).
  Połączenie przewodowe z gniazda RJ14 do modułu MMPK.

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Manipulator przywoławczy MP-W umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie urządzenia w zasięgu ręki chorego lub odwieszenie na wieszaku ściennym przy łóżku.
  Chwilowe wciśnięcie przycisku WEZWANIE zostaje zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.

CE

www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Seria COMPACT - łącznik pociągowy ŁP



- **ZASTOSOWANIE:**

  Natynkowy łącznik pociągowy ŁP z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest wewnątrz sanitariatów i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów (także w przypadku upadku na podłogę).

- **DANE TECHNICZNE:**

  Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa.
  Brelok w kolorze czerwonym z piktogramem żelowym, sznur ok.185 cm.
  Dodatkowa naklejka żelowa "WEZWANIE" na glazurę.

- **MONTAŻ:**

  W sanitariatach ok. 200-220 cm nad podłogą.
  Dołączany do modułu MMPK.
  Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Łącznik pociągowy jest źródłem wezwania dla pacjentów przebywających w sanitariatach, umożliwiając im wezwanie pomocy również w przypadkach upadku na podłogę.
  Pociągnięcie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE, aktywuje wezwanie zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

CE

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Panel sygnalizacyjny CS15-R z opcją komputerowej rejestracji zdarzeń



Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

- **ZASTOSOWANIE:**

  Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów w dyżurkach pielęgniarskich.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Pojemność: do 15 pomieszczeń (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze).
  Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową z diodami LED SMD.
  Aktywny poziom wejść: MINUS (MASA).
  OPCJA komputerowej rejestracji wezwań z panelu CS15-R (opis w dokumentacji REJESTRACJA-PC).
  Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu.
  Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem GŁOŚNY/CICHY (praca nocna).
  Możliwość dołączenia paneli sygnalizacji dodatkowej PS4S oraz równolegle drugiego panelu CS15-R.
  Przełącznik WYCISZENIA SYGNAŁU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).

- **MONTAŻ:**

  W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
  Indywidualne połączenia przewodowe do modułów MMPK.
  Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Panel CS15-R sygnalizuje zdarzenia w oddziale:
  - optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru pomieszczenia,
  - akustycznie: ciągły sygnał akustyczny.

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Panel sygnalizacyjny CS22



- **ZASTOSOWANIE:**

  Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów w dyżurkach personelu.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Pojemność: do 22 pomieszczeń (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze).
  Diody świecące z polami na numery sal oraz diody funkcyjne ALARM, PRACA NOCNA i ZASILANIE.
  Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem PRACA NOCNA (tryb cichy).
  Wyłącznik WYCISZENIA SYGNAŁU: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).
  Możliwość równoległego dołączenia drugiego panelu CS22.
  Opcja dołączenia do 4 mini-central PS4S do akustycznego przekazywania wezwań do innych pomieszczeń personelu.
  Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową.
  Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 12V/3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu (w celu uniemożliwienia kasowania wezwań w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).
  Polaryzacja aktywnego sygnału na wejściach: +12 V DC, brak opcji komputerowej rejestracji.

- **MONTAŻ:**

  W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
  Indywidualne połączenia przewodowe z modułów MMPK.
  Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecane osadzenie puszki instalacyjnej wtynkowej fi. 60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Panel CS22 sygnalizuje w dyżurce personelu zdarzenia w oddziale:
  - optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru pomieszczenia.
  - akustycznie: ciągły sygnał akustyczny, aż do skasowania wezwania lub wyciszenia.
  Sygnalizacja alarmu blokuje czasowo sygnalizację wezwań od pacjentów.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są **GWARANCJĄ do 5 lat.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

CE

www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Komputer z oprogramowaniem CallnetMonitorSMS



Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są **GWARANCJĄ do 5 lat.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

- **ZASTOSOWANIE:**

Aplikacja CallnetMonitorSMS pracuje na komputerze w dyżurce personelu połączonym z magistralą cyfrową i odbiera informacje o zdarzeniach w systemie przywoławczym (WEZWANIA i KASOWANIA) oraz archiwizuje je na dysku komputera w postaci zaszyfrowanej algorytmem 3DES (niemożliwa jest edycja zapisanych zdarzeń). Jednocześnie umożliwia wizualizację bieżących wezwań oraz ich sygnalizację akustyczną komunikatami głosowymi (podawany jest numer pomieszczenia). Aplikacja pozwala na tworzenie raportów dziennych o zdarzeniach (z dokładnym czasem wezwań i ich obsługi). Dodatkowo, możliwe jest powiadamianie SMS personelu o wezwaniach (z identyfikacją sali).

- **CHARAKTERYSTYKA:**

- **komputer w dyżurce personelu z aplikacją CallnetMonitorSMS**
- nowoczesne oprogramowanie dla systemu Microsoft's Windows **10**,
- obsługa 1...6 koncentratorów magistralowych: **do 90 numerów - pomieszczeń**,
- wizualizacja zdarzeń oraz komunikaty głosowe (numer pomieszczenia),
- archiwizacja wezwań oraz ich skasowań wraz z dokładnym czasem - **zapis szyfrowany 3DES**,
- możliwość sporządzania i drukowania raportów o przebiegu zdarzeń dla wybranego dnia,
- powiadamianie SMS personelu o wezwaniach na telefon komórkowy.

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są **GWARANCJĄ do 5 lat.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Modem-nadajnik SMS - powiadamianie



- **ZASTOSOWANIE:**

  Modem-nadajnik GSM dołacza się do komputera w dyżurce kablem do portu USB (1 m). Modem wysyła poprzez sieć GSM powiadomienia SMS na telefon personelu o wezwaniach, z pełną identyfikacją numeru pomieszczenia.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Gabaryty: 290x215x40 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS.
  Karta SIM 3/4/5 G dowolnego operatora sieci komówrkowej.
  Połączenie z komputerem kablem USB.

- **MONTAŻ:**

  W dyżurce personelu obok komputera z oprogramowaniem CallnetMonitorSMS.

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Modem-nadajnik GSM w momencie pojawienia się weawania od pacjenta zarejestrowanego w aplikacji wysyła powiadomienie SMS do zdefiniowanego telefonu personelu, z pełną identyfikacją sal (np. "WEZWANIE Sala315").

- **UWAGI:**

  Koszty wysyłania powiadomień SMS ponosi wyłącznie użytkownik systemu, w zależności od wybranej taryfy dla karty SIM.

www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

OPCJA - lampa sygnalizacyjna LS nad drzwiami wybranych pomieszczeń.



Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są **GWARANCJĄ do 5 lat.**

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

- **ZASTOSOWANIE:**

  Lampa sygnalizacyjna LS instalowana jest OPCJONALNIE nad drzwiami wybranych pomieszczeń w korytarzu i sygnalizuje optycznie oraz akustycznie (z możliwością wyłączenia sygnału) wezwania od pacjentów z sal chorych i sanitariatów.

- **DANE TECHNICZNE:**

  Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa.
  Matryca czerwonych diod świecących, układ podtrzymujący wezwania.
  Sygnalizator akustyczny z możliwością wyłączenia sygnału.
  Napięcie robocze: 12V DC, pobór prądu przy sygnalizacji ok.100 mA.

- **MONTAŻ:**

  W korytarzu, 10-20 cm nad drzwiami pomieszczeń.
  Połączenie przewodowe do mini-modułu MMPK.
  Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

  Lampa LS umożliwia dodatkową, OPCJONALNĄ sygnalizację wezwań od pacjentów w korytarzu oddziału nad drzwiami wybranych pomieszczeń świeceniem matrycy czerwonych diod świecących oraz sygnałem akustycznym (z mośliwością jego wyciszenia).
  Kasowanie wezwania następuje po wciśnięciu przycisku kasującego.